

Le VistaScan Mini Easy compact et simple

Leader sur le marché avec la technologie PCS brevetée



AIR COMPRIMÉ
ASPIRATION
IMAGERIE
ODONTOLOGIE
CONSERVATRICE
HYGIENE

VistaScan Mini Easy – compact et simple

VistaScan Mini Easy simplifie l'imagerie du cabinet, grâce à une technologie brevetée et une qualité d'image hors norme des scanners pour écrans à mémoire de Dürr Dental.

Made in Germany.



Le prix et la vitesse d'un capteur

Le scanner pour écrans à mémoire VistaScan Mini Easy

Depuis l'introduction des films argentiques conventionnels en chirurgie dentaire, Dürr Dental a été leader en matière d'aide au diagnostic. Le numérique avec Dürr Dental offre aux dentistes des images en haute résolution pour répondre à toutes les demandes. Plus de 40 ans d'expérience dans le développement de la technologie à rayons-x ont conduit à des résultats innovants et parfaitement adaptés aux pratiques des cabinets. Le scanner pour écrans à mémoire VistaScan Mini Easy produit des images diagnostiques encore plus rapidement. L'équipement compact est particulièrement simple à utiliser et requiert un minimum de place – on peut l'installer directement dans la salle de soin. L'avantage: on peut prendre les clichés et obtenir les résultats près du fauteuil. Les écrans à mémoire VistaScan peuvent être scannés en quelques secondes. C'est le meilleur moment pour passer aux écrans à mémoire.



Films argentiques




Concurrence (14 bits)



VistaScan (16 bits)


La gradation des niveaux de gris des écrans du VistaScan offre une image aussi précise que les films

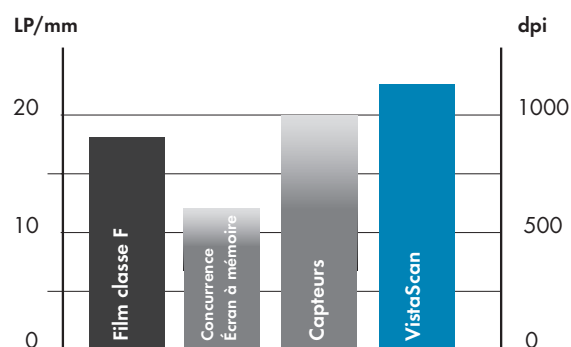

Comparaison de la résolution des systèmes à rayons x : Le système VistaScan de Dürr Dental obtient la meilleure résolution par rapport à ses concurrents.



Images en haute résolution, un appareil silencieux, un diagnostic sûr.

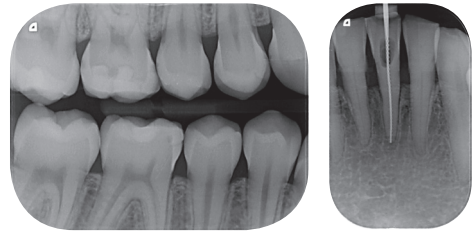

Tailles habituelles

Le VistaScan Mini Easy peut lire des écrans de taille 0 et 2, et la surface est utilisée à 100%. Manipulation simple - comme celle d'un film argentique.




Manipulation facile

Numériser, effacer, se préparer pour la prochaine étape en un circuit. Image disponible en 6 secondes, à proximité du fauteuil.



Intégration facile

VistaScan Mini Easy peut s'utiliser avec DBSWIN ou tout autre logiciel via des plugins ou des pilotes Twain. Il peut facilement s'intégrer au réseau du cabinet par l'USB et le RJ 45.

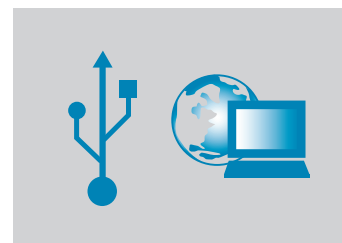

Points importants :

- Images rapidement disponibles
- Compact
- Utilisation près du fauteuil
- Concept opératoire sophistiqué
- Liaison avec le PC via USB/RJ 45
- Image de grande qualité

Données, faits et accessoires

VistaScan Mini Easy	
Taille des écrans	0 (2 x 3 cm) + 2 (3 x 4 cm)
Résolution effective (pl/mm)	22 (1100 dpi)
Poids (kg)	6,5
Dimensions (H x L x P mm)	226 x 234 x 243
Fonction de veille	Oui
Interfaces	USB/RJ 45



Angulateurs

Les angulateurs Dürr Dental garantissent une protection optimale grâce à des bords ébarbés et arrondis. Nous proposons des angulateurs pour tous les domaines d'application ; ils facilitent la réalisation de radiographies précises. Ref. 2130-981-50

Désinfection au FD 350, FD 333

Les lingettes de désinfection FD 350 Dürr Dental se prêtent tout particulièrement à la désinfection des petites surfaces et des petits objets comme les sachets de protection, les pièces à main etc. – elles sont très économiques, immédiatement opérationnelles, ne laissent pas de résidus et permettent un nettoyage ultra-rapide. La désinfection avec le FD 333 wipes offre une solution totalement virucide (Réf. CDF333A0140).

Lingettes de nettoyage d'écrans à mémoire

Les salissures sur les écrans à mémoire sont visibles sur les images et réduisent la durée de vie des écrans. La lingette de nettoyage d'écrans à mémoire VistaScan nettoie et désinfecte efficacement. Avantage : une qualité d'image optimale sur le long terme. Ref. CCB351B1001

DÜRR DENTAL FRANCE
8, rue Paul Héroult
92500 Rueil-Malmaison
France
Tel.: +33 (0) 1 55 69 11 50
Fax: +33 (0) 1 55 69 11 51
www.durr.fr
info@durr.fr

DÜRR DENTAL BELGIUM B.V.B.A.
Molenheidebaan 97
3191 Hever
Belgique
Tel.: +32 (0) 15 61 62 71
Fax: +32 (0) 15 61 09 57
www.durr.be
info@durr.be

DÜRR DENTAL SCHWEIZ AG
Grabenackerstr. 27
8156 Oberhasli
Suisse
Tel.: +41 (0) 44 885 06 34
Fax: +41 (0) 44 885 06 35
www.duerrdental.ch
info.ch@duerrdental.com

 **DÜRR
DENTAL**
LE MEILLEUR, TOUT UN SYSTÈME